

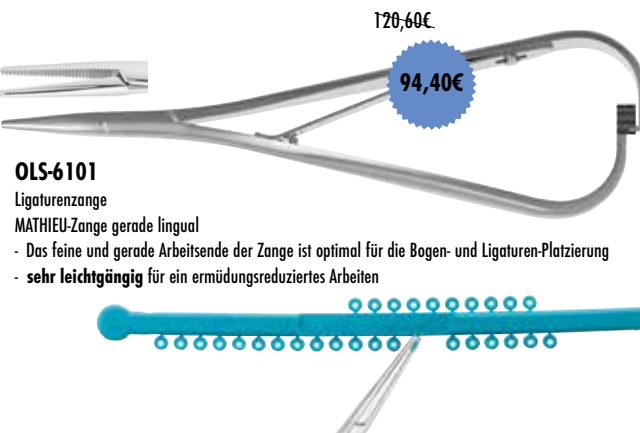
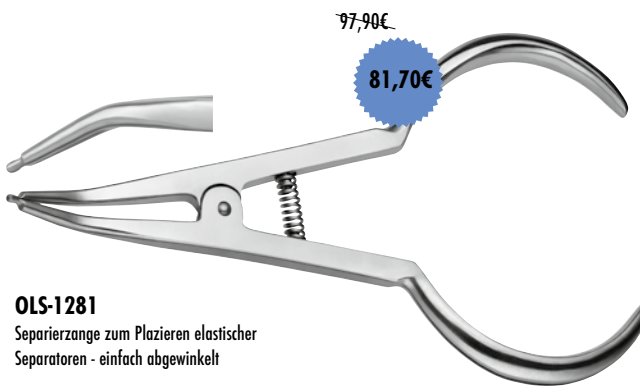
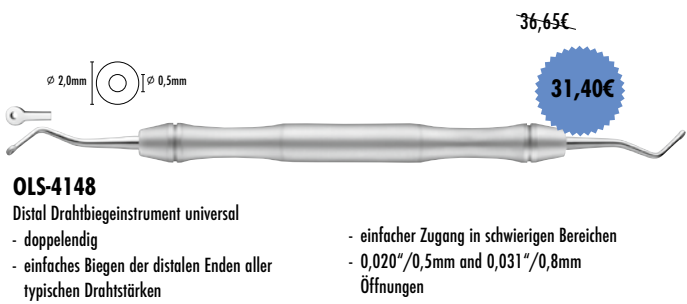
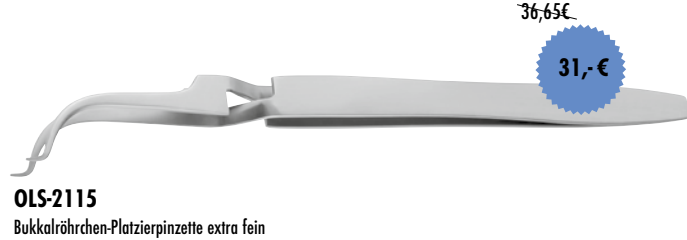


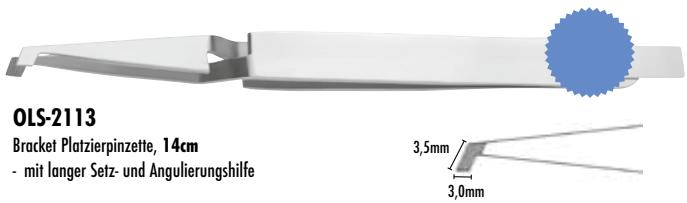

990 Ölstifte 2er-Set
Erhöhen Sie die Lebenserwartung Ihrer Instrumente
- keine braunen Verfärbungen durch herkömmliches Öl oder Spray
- mit leichtem Druck punktgenau ölen und konservieren
- Synthetisches TOP Öl, bis 260°C erhitzen
- geeignet für alle Sterilisationsverfahren
- transparent + geruchlos, toxikologisch unbedenklich
- zugelassen entsprechend der USDA, FDA und DAB

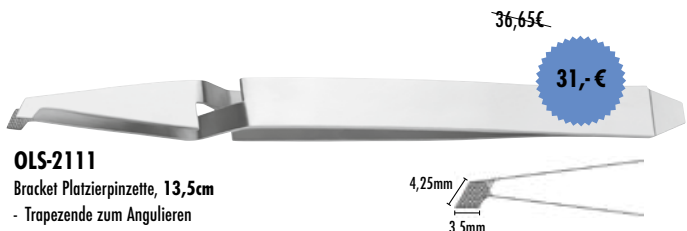

BESTELL-FAX: (+49 (0) 5405/92 04 15)

Artikelname	Art.-Nr.	Menge	Einzelpreis ¹⁾

¹⁾ zzgl. MwSt. und Versandkosten




Praxisadresse/Stempel:

ATS ORTHO


An der Feldriede 2 49205 Hasbergen
www.ats-ortho.de service@ats-ortho.de

Beratung unter 0 54 05 / 92 04 - 0


K0013-2020 AK KEO FR Aktion Frühjahr 2021

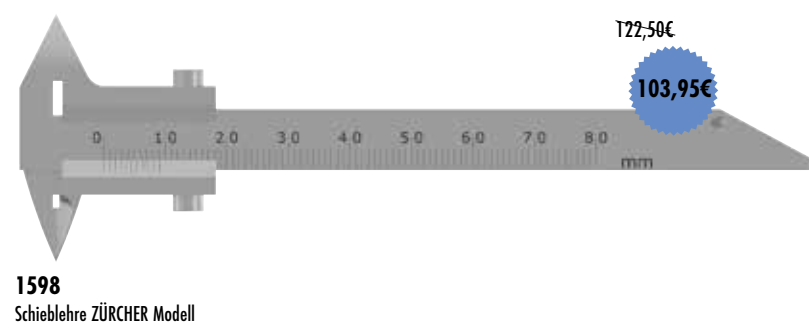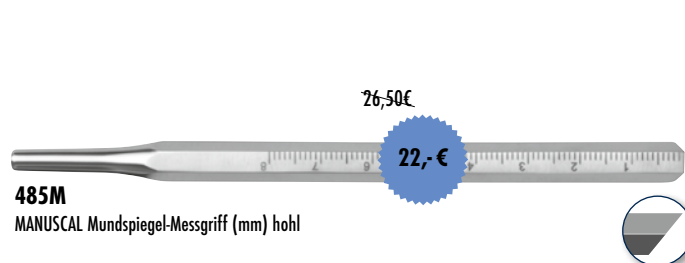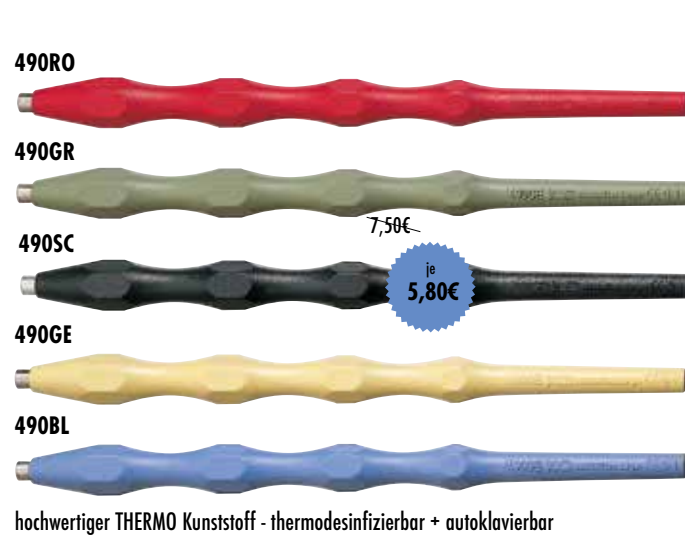

STERI-WASH-TRAY

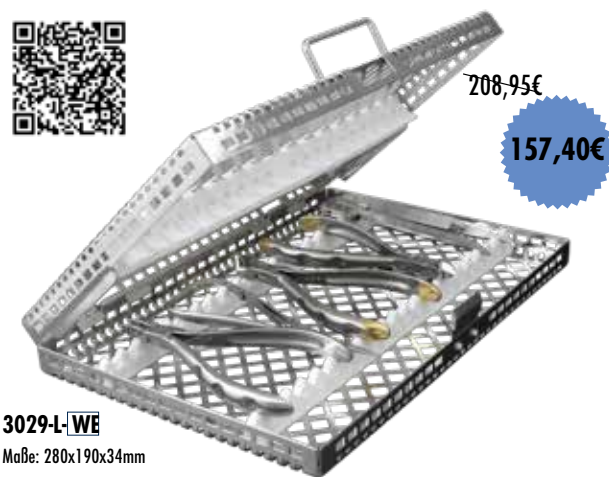

3029-L-WF
Maße: 280x190x34mm
Passend für 15-20 Instrumente
Lieferung ohne Instrumente

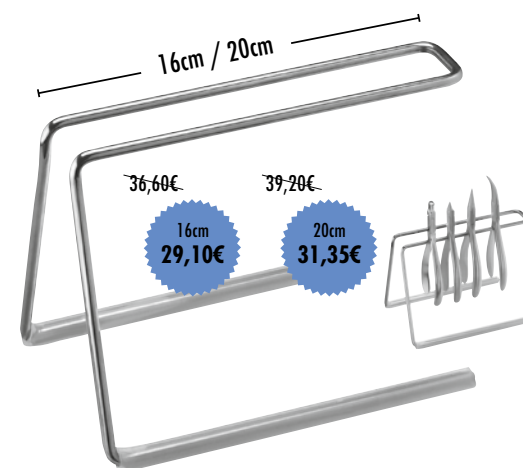

1495 - 16 cm - 1495L - 20cm
Zangenständer rostfrei, mit rutschfestem Silikon
für einen sicheren Stand

carl marlin solingen
FINEST DENTAL INSTRUMENTS

NEUENKAMPER STR. 80 - 86 · D-42657 SOLINGEN · GERMANY
TEL. +49(0)212/81 00 44 · FAX +49(0)212/8 73 45
E-MAIL: INFO@CARLMARTIN.DE · INTERNET: WWW.CARLMARTIN.DE

carl marlin solingen

FINEST DENTAL INSTRUMENTS
GERMANY
- SINCE 1916 -

Bekannte Formen
in neuen Größen!



PROMOTION
KIEFERORTHOPÄDIE
Frühjahr 2021

gültig vom 01.03. bis 30.06.2021

Carl Martin-Aktionspreise. Preise p. Stück/Pack. in €, zzgl. MwSt., ab Werk, gültig vom 01.03. bis 30.06.2021. Bestellung bei allen teilnehmenden **Dental-Fachhändlern**.
NON-DENTAL-Artikel lieferbar nur solange der Vorrat reicht! / Lieferung ähnlicher Artikel vorbehalten! Preisänderungen, Preisfehler oder Produktabweichungen vorbehalten.

Clear Aligner Zangen

Clear Aligner-SET

OLS-1500-SET6
Inhalt: OLS-1501, OLS-1502, OLS-1505,
OLS-1506, OLS-1510, OLS-1520

838,95€

SET
729,- €

NEU

Lochstanze

6mm,
TC Einlagen

T56,45€
139,90€

OLS-1501
Lochstanze zur Ausstanzung halbmondförmiger Aussparungen im Bereich von Brackets oder Knöpfchen. Auch zur Entfernung überstehender Kunststoffkanten um Verletzungen am Weichgewebe zu vermeiden.

Stanze tropfenform

TC Einlagen

T56,45€
139,90€

OLS-1502
Spezialzange zum Ausstanzen einer tropfenförmigen Einkerbung am Rand des Aligners. Die Tropfenform ermöglicht das sichere Einhängen elastischer Gummizüge - auch für den Patienten.

Horizontal Zange

T41,75€
126,90€

OLS-1505
Spezialzange zur Erzeugung von horizontalen Vertiefungen für individuellen Wurzeltorque. Ermöglicht auch die Verbesserung der Retention von Alignern oder Retainern.

Vertikal Zange

T41,75€
126,90€

OLS-1506
Spezialzange zur Erzeugung einer Überkorrektur einer Rotation. Weiterhin können mit der Vertikal Zange In-Out Diskrepanzen beseitigt werden.

Punkt Erhebungs zange

1,5mm

T41,75€
126,90€

OLS-1510
Spezialzange zur Erzeugung punktförmiger Erhebungen im Aligner. Ermöglicht die selektive Aktivierung, um den Druck auf die Einzelzähne zu erhöhen.

Reverse Zange

T41,75€
126,90€

OLS-1520
Spezialzange zum invertieren von Erhebungen im Aligner.

+++ Programmaufbau – weitere Formen in unterschiedlicher Größe folgen +++

OLS-1115-L
T35,15€
109,15€

OLS-1115A-L
T35,15€
109,15€

OLS-1115-L
Distal-Schneider MINI-Universal
15cm (große Variante) gerader Griff

OLS-1115A-L
Distal-Schneider MINI-Universal
15cm (große Variante)
Griff abgewinkelt 10°

TC

- mit Drahtfangvorrichtung
- Schnitteinsätze aus Hartmetall min.: .012" (.30 mm)
- Rechteck Drähte: max. 0.53 mm x 0.64 mm/.021" x .025"
- Runde Drähte: min. 0.30 mm/.012" - max: 0.50 mm/.020"
- Geflochtene Drähte: max: 0.40 mm/.016mm

OLS-1111
T35,15€
109,15€

OLS-1111-S
T35,15€
109,15€

OLS-1111
Distal-Schneider MINI-Universal
13cm (normale Variante)

OLS-1111-S
Distal-Schneider MINI-Universal
12cm (kleinere Variante)

TC

- mit Drahtfangvorrichtung
- Schnitteinsätze aus Hartmetall

max. Ø 0.56mm x 0.70mm / 0.022" x 0.028"

OLS-1114
T35,15€
109,15€

OLS-1114-S
T35,15€
109,15€

OLS-1114
Distal-Schneider 13cm (normale Variante)

OLS-1114-S
Distal-Schneider 12cm (kleinere Variante)

TC

- mit Fangvorrichtung
- bündiges Schneiden zum Bracket oder Bukkalröhrchen

max. Ø 0.56mm x 0.70mm / 0.022" x 0.028"

OLS-1113
T35,15€
109,15€

OLS-1122
T22,75€
102,30€

OLS-1113
Flush-Cutter
- mit Hartmetalleinlagen

max. Ø 0.56mm x 0.70mm / 0.022" x 0.028"

TC

OLS-1122
Seitenschneider 15°
- Schnitteinsätze aus Hartmetall
max. Ø 0.56mm x 0.70mm / 0.022" x 0.028"

OLS-1133
T22,75€
102,30€

OLS-1263
T97,90€
81,70€

OLS-1133
Lock Pins & Ligaturschneider
MINI 15°
- Schnitteinsätze aus Hartmetall
max. Ø 0.015" / 0.4mm

OLS-1263
Lingual Bracket Entfernungszange abgewinkelt
- durch die abgewinkelte Form eignet sich die Zange besonders zum Entfernen von Turbo bites und lingualen Brackets ohne sie zu beschädigen

OLS-1261
T97,90€
81,70€

OLS-1262
T97,90€
81,70€

OLS-1261
Bracket Entfernungszange gerade - für alle Bracketmaterialien geeignet

OLS-1262
Bracket Entfernungszange abgewinkelt - für alle Bracketmaterialien geeignet

OLS-1241
T110,35€
92,- €

OLS-1240A
T4,85€
3,95€

OLS-1242
T110,35€
92,- €

OLS-1241
Band/Bracket-Entfernungszange posterior
- lange Schneide mittig zum okklusalen Pad

OLS-1240A
Ersatz-Pads für Band-Entfernungszangen
OLS-1241 u. 1242 (Ø 5,3mm)

OLS-1242
Band/Bracket-Entfernungszange posterior
- kurze Schneide zum Anfang des Pads

OLS-1211
T97,90€
81,70€

OLS-1213
T22,75€
102,30€

OLS-1211
Weingart Universalzange standard
- mit kreuzverzahnten Arbeitsenden

OLS-1213
Weingart Universalzange extra-schmal
- mit Hartmetalleinlagen

OLS-1292
T110,35€
92,- €

OLS-1311
T97,90€
81,70€

OLS-1292
Hammerhead Mehrzweck-Biegezange für NiTi Draht
max. Ø 0.025" / 0.64mm

OLS-1311
Bogen- & Torquezange (1,3mm / 0,5"), zum Formen von Biegungen erster, zweiter und dritter Ordnung
max. Ø 0.56mm x 0.64mm / 0.022" x 0.025"

OLS-1326
T110,35€
92,- €

OLS-1328
T110,35€
92,- €

OLS-1326
JARABAK
Drahtbiegezange
- zum Biegen von Light-Wire
- die Kerben ermöglichen präzises Biegen und Schließen von Loops.
max. .028" / 0,7mm

OLS-1328
V-Stop Zange
- zum Formen von V-Biegungen in Bogendraht (auch Nickel-Titan) um deren Verschiebung zu verhindern V-Stop Pliers
max. Ø 0.028" / 0,7mm

OLS-1340
T110,35€
je 92,70€

OLS-1341
T110,35€
je 92,70€

OLS-1342
T110,35€
je 92,70€

OLS-1340
Bajonett Stufenbiegezange 0,5mm

OLS-1341
Bajonett Stufenbiegezange 0,75mm

OLS-1342
Bajonett Stufenbiegezange 1,0mm

Zum Biegen von bajonettförmigen (0,5mm - 0,75mm - 1,0mm) Stufen in einem Arbeitsschritt. Die Spezielle T-Form ermöglicht den Einsatz rechts wie links für Step-Up/ Step-down oder In/Out Biegungen - auch bei einligierten Bögen.

Durch die grazile Kopfgröße ergibt sich ein leichter Zug an engeren Stellen zwischen Draht und Zahn - auch von okkusal. Die Zange kann intra- und extraoral eingesetzt werden.