



Agility®

CERAMIC BRACKET SYSTEM


Made in the U.S.A by G&H® Orthodontics



- Ein nahezu unsichtbares polykristallines Keramik-Bracket.
- Transluzent in der Optik.
- Ästhetisch ansprechend.
- Herstellung im Spritzgussverfahren (CIM).
- Neuartige „Portal“ Klebebasis.
- Der Kunststoff fließt durch die Portale in der Basis und sorgt damit für eine beispiellose mechanische Haftung und eine optimales Debonding.


Lieferbar in MBT und ROTH

Preise: Set OK/UK 5-5 / 20 Stück 99,00€

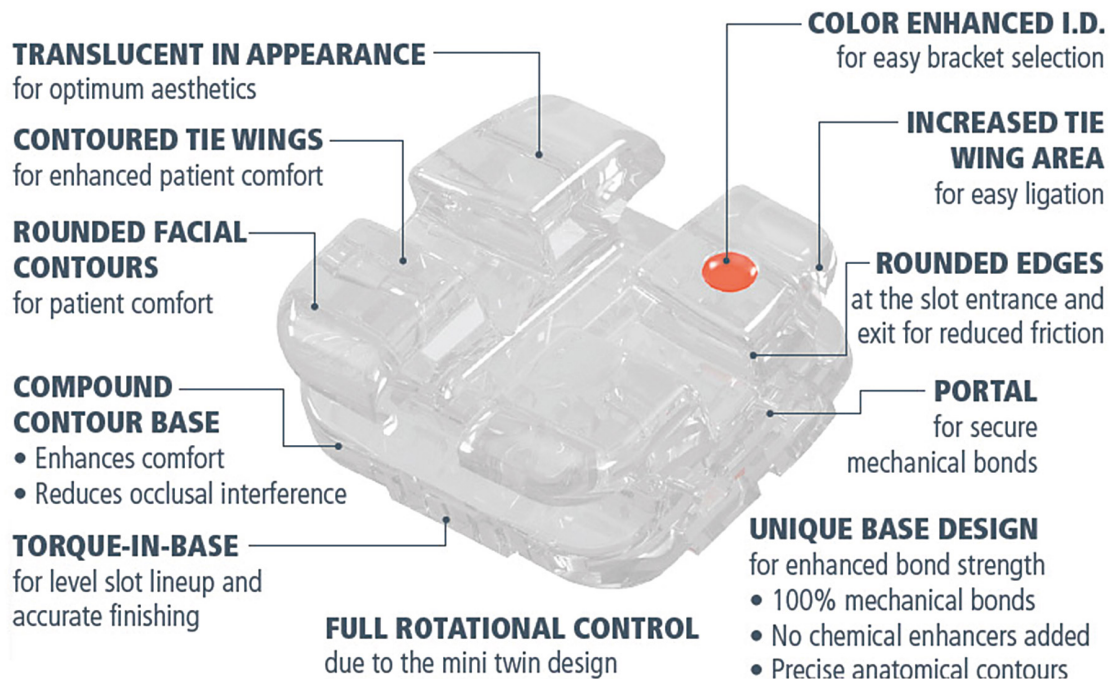



Einzigartige Klebebasis mit Fließkanälen

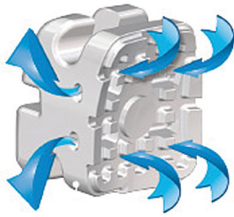

Kleber tritt durch 4 Öffnungen in die Basis ein und verteilt sich über die Kanäle.



Überschüssiger Kunststoff wird vor der Aushärtung entfernt.

Leichtes und sicheres Entfernen wie bei Metall-Brackets.

Der überschüssige Klebstoff tritt durch Kanalöffnungen an den mesio-distalen Seiten des Brackets aus.

Beim Positionieren des Brackets fließt der überschüssige Kleber durch das Andrücken in die offenen Kanäle nach außen.

Während der Aushärtung polymerisiert der Klebstoff in den Kanälen und an der Basis wie eine gute mechanische Verbindung.

UPPER RIGHT					UPPER LEFT			UPPER RIGHT		UPPER LEFT	
Red Bicuspid	Red Bicuspid	Purple	White	Orange	Orange	White	Purple	Red Bicuspid	Red Bicuspid		
Bicuspid w/hk	Bicuspid w/hk	Cuspid w/hk	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid w/hk	Bicuspid w/hk	Bicuspid w/hk		
2nd Bic w/hk	1st Bic w/hk	Green	Black	Black	Black	Black	Green	1st Bic w/hk	2nd Bic w/hk		
2nd Bicuspid Yellow	1st Bicuspid Blue							1st Bicuspid Blue	2nd Bicuspid Yellow		
LOWER RIGHT					LOWER LEFT						



MBT Prescription .018“/.022“

Maxillary

Tooth	Torque	Angle	Rotation	M-D
Central	17°	4°	0°	.150"
Lateral	10°	8°	0°	.132"
Cuspid	-7°	8°	0°	.135"
Bicuspid	-7°	0°	0°	.130"

Mandibular

Tooth	Torque	Angle	Rotation	M-D
Anterior	-6°	0°	0°	.120"
Cuspid	-6°	3°	0°	.135"
1st Bicuspid	-12°	0°	0°	.130"
2nd Bicuspid	-17°	0°	0°	.130"

Roth Prescription .018“/.022“

Maxillary

Tooth	Torque	Angle	Rotation	M-D
Central	12°	5°	0°	.150"
Lateral	8°	9°	0°	.132"
Cuspid	0°	11°	0°	.135"
Bicuspid	-7°	0°	0°	.130"

Mandibular

Tooth	Torque	Angle	Rotation	M-D
Anterior	0°	0°	0°	.120"
Cuspid	-11°	5°	0°	.135"
1st Bicuspid	-17°	0°	0°	.130"
2nd Bicuspid	-22°	0°	0°	.130"



Agility[®] CERAMIC

Bei Fragen oder Bestellungen kontaktieren Sie uns gerne: