



VIPER™ LOW PROFILE BUCCAL TUBES

Innovative Technologie und elegantes, ästhetisches Design
 Hergestellt in den USA von G&H® Orthodontics


Die glatten und grazilen G&H® VIPER™ Klebe-Bukkalröhrchen vereinigen die neueste Design-Technologie mit einer wachsenden Nachfrage an komfortablen, einfach zu handhabenden Klebetubes, die eine Behandlung erleichtern und wertvolle Stuhlzeit reduzieren.




Folgende Merkmale sind eingearbeitet:

- METALL-SPRITZGUSSVERFAHREN MIM = Metal Injection Molded zur Vermeidung okklusaler Interferenz zum leichten Ausrichten und zur Optimierung des „Case Finishing“
- FLACHES PROFIL
- TORQUE IN DER BASIS
- KONTURIERTE BASIS anatomisch dem Zahn angepasst, erleichtert das korrekte Platzieren
- ADAPTIERBARER BALL HOOK für maximalen Patientenkomfort, ohne gingivale Überbissverletzung
- PERMANENTE MARKIERUNG zur Identifizierung und Positionierung
- 80-GAUGE MESH-PAD mit anatomisch geformter Passform und maximaler Haftkraft.

Kleines Pad

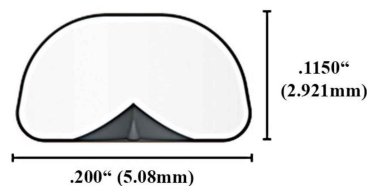

Standard Pad

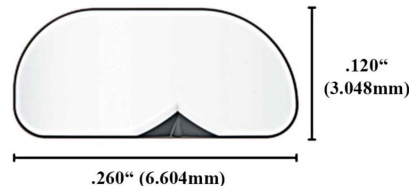



4,15€/1



4,15€/1



4,15€/1



4,15€/1



3,10€/1

Alle Preise verstehen sich zzgl. Umsatzsteuer sowie Verpackungs- und Transportkosten.

VIPER™ Klebetubes sind mit speziellen geometrischen Einbuchtungen versehen. Diese sind an der Fazialfläche zwecks Identifizierung des Molar-Quadranten sowie zur Unterstützung einer endgültigen Positionierung farblich kodiert.

- **DISTALE KERBE** für zusätzlichen Halt von Ligaturen und Tieback-Modulen
- **SETZHILFE OKKLUSAL / GINGIVAL** ermöglicht die leichte Platzierung im Seitenzahnbereich und ist für leichte Anpassungen vor dem Aushärten des Klebers hilfreich
- **TRICHTERFÖRMIGE ÖFFNUNG** unterstützt das Einführen des Bogens

Verfügbare Techniken

MBT	.018" + .022" Slot	OK: -14° T., 10° Offset,	UK: -20° T.,
Roth	.018" + .022" Slot	OK: -10° T., 8° Offset,	UK: -25° T., 5° Offset
Ricketts/Edgewise	.018" Slot	OK/UK: 0° Werte	
7er DB Tube		0°, -10°, -14°, -25° Torque	

