




Twin MIM Bracket **Roth** (Monoblock)

UVP 1,49€* | ab 200 Stück 1,19€* | ab 400 Stück 0,99€* | ab 1.000 Stück 0,79€*

Lieferbar in Roth .018"/.022",
optional Hook am 3er oder 3, 4, 5er.

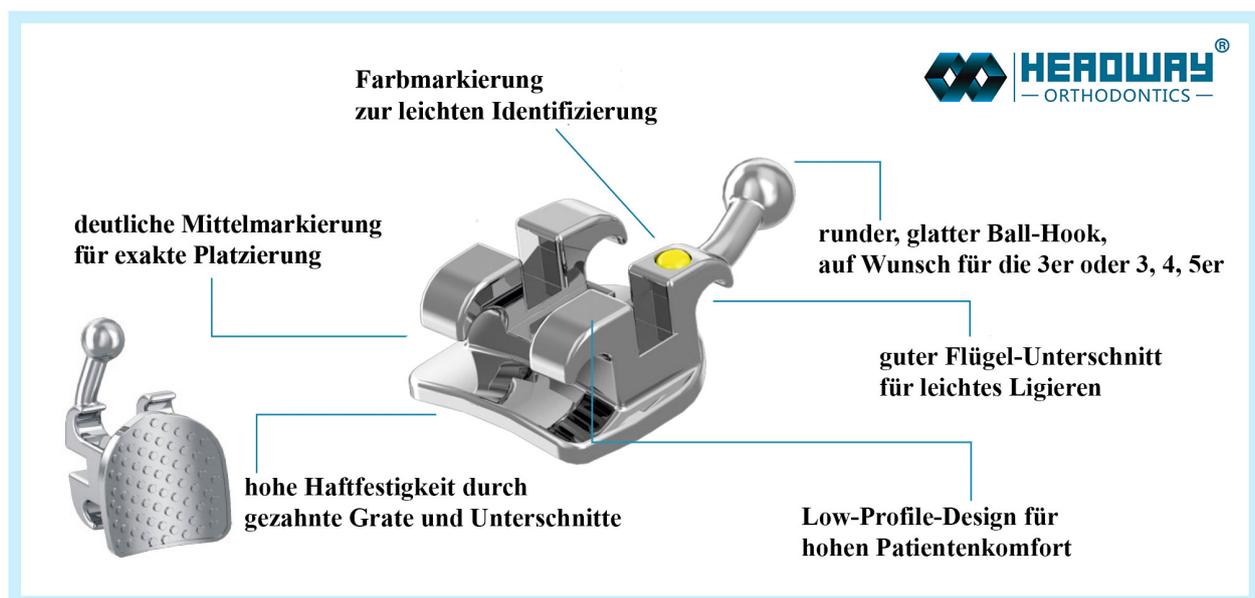

- Bracket und Basis bilden zusammen eine solide, ganzheitliche Edelstahl-Einheit.
- Die einteilige Konstruktion aus massivem Edelstahl kann auf Schweißpunkte verzichten und ist stabiler als geschweißte oder hartgelötete Verbindungen.
- Maschinell erstellte Unterschnitte und gezahnte Grate an der Klebebasis sorgen für eine außergewöhnlich gute Haftfestigkeit.
- Nach Bukkal verlängerte gingivale Flügel am Bicuspид ermöglichen eine leichtere Platzierung der Ligaturen.

ATS ORTHO:
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne
einen Fall als Muster
kostenlos.

*Alle Preise verstehen sich zzgl. der Kosten für Verpackung und Transport sowie gesetzlich gültiger Umsatzsteuer.

Roth Prescription .018"/.022"



Maxillary


| Brackets | Description | Torque | Ang. | width | |
|-----------|-------------|--------------|------|-------|-------|
| MAXILLARY | Centrals | / | +12° | 5° | 3.2mm |
| | Laterals | / | +8° | 9° | 2.8mm |
| | Cuspids | without hook | 0° | 11° | 2.8mm |
| | | with hook | 0° | 11° | 2.8mm |
| | Bicuspids | without hook | -7° | 0° | 2.8mm |
| | | with hook | -7° | 0° | 2.8mm |

Mandibular

| Brackets | Description | Torque | Ang. | width | |
|------------|---------------------------|--------------|------|-------|-------|
| MANDIBULAR | Lower Anteriors | / | -1° | 0° | 2.3mm |
| | Cuspids | without hook | -11° | 5° | 2.8mm |
| | | with hook | -11° | 5° | 2.8mm |
| | 1 st Bicuspids | without hook | -17° | 0° | 2.8mm |
| | | with hook | -17° | 0° | 2.8mm |
| | 2 nd Bicuspids | without hook | -22° | 0° | 2.8mm |
| | | with hook | -22° | 0° | 2.8mm |

Twin MIM Bracket Roth Identification System

Metal Brackets Identification

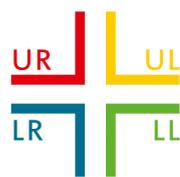

Lower Anteriors - No Markings

Empfehlung

Bracket Platzierung:

Oberkiefer: 1er - 4mm, 2er - 3,5mm, 3er - 4,5mm, 4/5er - 4mm
 Unterkiefer: 1/2er - 3,5mm, 3er - 4mm, 4/5er - 4mm

FDI (World Dental Federation) System

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |

