



VAPOR™ CERAMIC BRACKET SYSTEM

Hergestellt in den USA von G&H® Orthodontics




- Ein nahezu unsichtbares polykristallines Keramik-Bracket,
- transparentes Erscheinungsbild,
- ästhetisch sehr ansprechend,
- CIM = Ceramic Injected Moulded Herstellung,
- revolutionäre Portal-Basis,
- Klebstoff fließt durch Kanäle in der Basis und erzeugt dadurch eine beispiellose, mechanische Haftung und optimales Debonding.

**Lieferbar in Roth und MBT .018" + .022" Slot
 Hooks am 3er oder Hooks an 3, 4, 5er**


1-Fall = 20 Stück 118,00€* | 5-Fall 530,00€* | 10-Fall 990,00€*

einzel pro Zahn Pack à 5 Stück, pro Stück 5,90€*
 ab 100 Stück 5,30€* | **ab 200 Stück 4,95€***

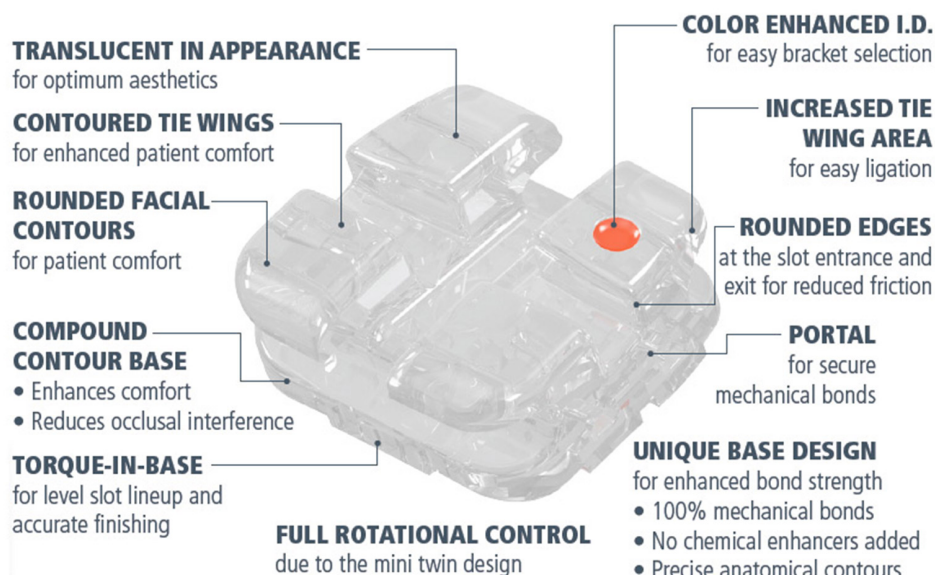

*Alle Preise verstehen sich zzgl. Kosten für Verpackung und Transport sowie gesetzlich gültiger Umsatzsteuer.

Vapor's™ einzigartige Klebebasis mit Fließkanälen

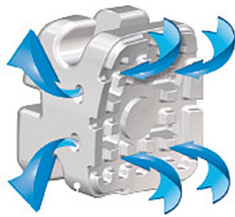

Kleber tritt durch 4 Öffnungen in die Basis ein und verteilt sich über die Kanäle.

Leichtes und sicheres Entfernen wie bei Metall-Brackets.




Überschüssiger Kunststoff wird vor der Aushärtung entfernt.

Der überschüssige Klebstoff tritt durch Kanalöffnungen an den mesio-distalen Seiten des Brackets aus.

Beim Positionieren des Brackets fließt der überschüssige Kleber durch das Andrücken in die offenen Kanäle nach außen.

Während der Aushärtung polymerisiert der Klebstoff in den Kanälen und an der Basis wie eine gute, mechanische Verbindung.

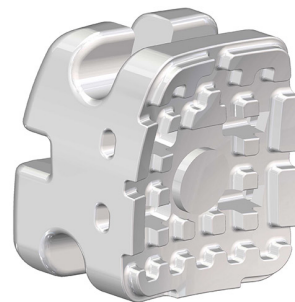

UPPER RIGHT					UPPER LEFT				
Red Bicuspid	Red Bicuspid							Red Bicuspid	Red Bicuspid
		Purple	White	Orange	Orange	White	Purple		
Bicuspid w/hk	Bicuspid w/hk	Cuspid w/hk	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid w/hk	Bicuspid w/hk	Bicuspid w/hk
2nd Bic w/hk	1st Bic w/hk	Cuspid w/hk	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Cuspid w/hk	1st Bic w/hk	2nd Bic w/hk
		Green	Black	Black	Black	Black	Green		
2nd Bicuspid Yellow	1st Bicuspid Blue							1st Bicuspid Blue	2nd Bicuspid Yellow
LOWER RIGHT					LOWER LEFT				